

MEDIWALK®

CATALOGUE 2018

Bracelet de sécurité



En vente depuis notre site internet officiel

www.mediwalk.fr

Location possible à partir du 17/05/2018

MEDIWALK

s.client@mediwalk.fr

09 72 45 93 15

Bracelet de sécurité MEDIWALK®




Spécifications : Bracelet Gps à fermeture sécurisée

- Localisation en temps réel depuis le web (privé) ou depuis notre application
- Mise en place de zones de sécurité (sortie et entrée de zone)
- Alerte par mail et SMS vers référents (illimité)
- Bouton SOS (permet d'alerter par SMS les référents)
- Alarme ouverture de bracelet
- Alarme batterie faible
- Autonomie : 12h en mode Gprs continue | 7 jours en mode Gprs off
- Bouton OFF sécurisé ne permettant pas à son porteur la mise sur Off
- Waterproof IP67 (non immersible) – Permet son port pendant la douche
- Pré-requis : Carte SIM au format micro ayant un accès internet (data)
- Charge du bracelet sur son porteur

Bracelet de sécurité MEDIWALK®

Spécifications : (suite) . . . Dimensions

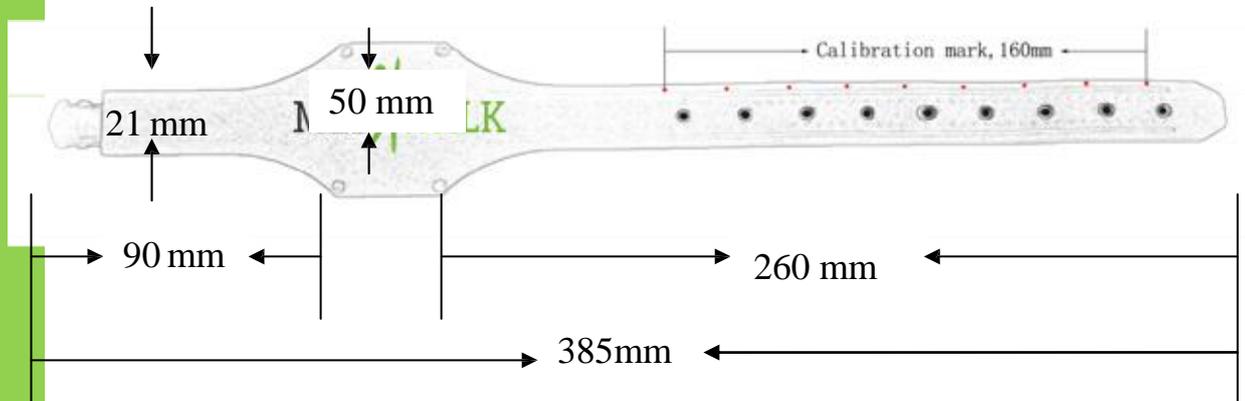

Charge du bracelet sur son porteur




Bracelet de sécurité MEDIWALK®

Charging Voltage	DC 4.5-5.5V/750mA (Mini USB)
Internal Battery	Rechargeable 750 mAh battery(3.7V)
Dimension	55*43*13mm
Weight	147.5g
Operating Temperature	-20 ~ +55 °C
GSM Module	Quad Band GSM 850/900/1800/1900 MHz
GPS Chipset	Newest Ublox chipset
GPS Sensitivity	-160Db
GPS Frequency	L1, 1575.42 MHz
C/A Code	1.023 MHz chip rate
Channels	50 Channels
Position Accuracy	<10 M, 2D RMS
Velocity Accuracy	0.1 M/S
Time Accuracy	Satellite Time: 1 millisecond time synchronization
Update Time	Average 0.1 second
Hot Start up	Average 1 second
Warm Start up	Average 3 second
Cold Start up	Average 27 second
Max. Altitude	18,000m (Max. 60,000 ft)
Max. Speed	500 m/s (Max. 1000 knots)
Max. Acceleration	less than 4g
Working time	10-12 days of standby time in personal mode; 12 hours of standby time in vehicle mode
LED	LED for showing states of power, GPS, GSM and battery level
Button	2 buttons. 1 SOS button, 1 power switch

Bracelet de sécurité MEDIWALK®

Géo sécurisez une zone

A partir de notre plateforme web, une cartographie vous permettra par simple mouvement de souris de définir une zone à ne pas franchir, simple et rapide à mettre en place ! Dès que votre bracelet Gps sortira de cette zone, une alerte vous sera envoyée par SMS et mail.

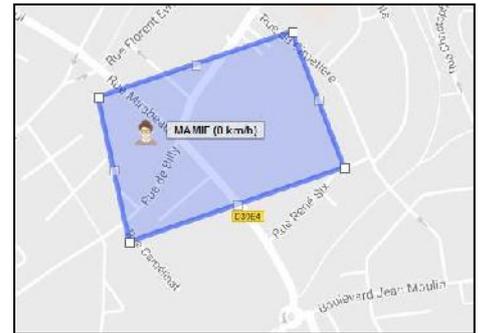

Fonctions disponibles : Entrée de périmètre, sortie et déviation de route



Types d'alertes : Réception d'alertes par mail et SMS vers référents (illimité).

Bouton SOS : Alerte par SMS et mail + bannière et alerte son sur ordinateur.

Batterie faible : Dès que la batterie atteint 20% de son autonomie, une alerte mail + sms sont émis vers les référents.

Ouverture bracelet : Alerte par mail et SMS dès que le bracelet est ouvert.

FAMILLES – AIDANTS – ASSISTANCE – ERRANCE – RASSURA

MEDIWALK



LOCALISEZ DEPUIS NOTRE APPLICATION MEDIWALK 1.0
(compatible IOS et Android – Smartphone et tablette)

OU DEPUIS UN ORDINATEUR DE BUREAU

DEPUIS UN ORDINATEUR

✓ Localisez en temps réel


✓ Affichage de l'alerte

en cours sur votre écran + Bip sonore dès qu'une alerte est déclenchée, un bandeau d'affichage apparaîtra sur votre écran ainsi qu'une alerte sonore.



✓ Définissez une zone de géo sécurité (entrée et sortie de zone)

Depuis votre espace sur notre plateforme, vous mettez en place une zone d'alerte.

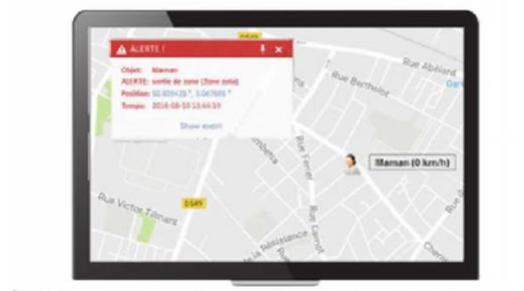

✓ Agrandissez votre cercle de surveillance

Enregistrez autant de référents que vous le souhaitez, adresses e-mail et numéros de téléphone, ils recevront les alertes en temps réel.



DEPUIS NOTRE APPLICATION :

Disponible en téléchargement gratuit depuis l'APP STORE ou le Google Play Store

✓ Localisez en temps réel

✓ Revoir l'historique des alertes émises

